

# XL-10 ActiLink™ Users Manual



English | French | Spanish

# What Does This Work With?

Use your ActiLink™ USB Transceiver with these



**Wellness  
Connected™** products:



**XL-20/ActiPed™**  
Wireless Activity  
Monitor



**UA-851THW/UA-  
851TMW/UA-851THX**  
Wireless Automatic  
Blood Pressure  
Monitor



**UC-324THW/UC-  
324TMW/UC-324THX**  
Wireless Precision  
Scale

# Getting Started

---

Before plugging the ActiLink™ USB Transceiver into your computer:


1. Go to [www.wellnessconnected.com/getstarted](http://www.wellnessconnected.com/getstarted)
2. Choose the service plan that is best for your needs.
3. Purchase that plan.
4. Download the Wellness Connected software that is appropriate for your computer.
5. Run the software and follow the installation process.
6. Enter in the required fields (your health information and product serial numbers).
7. Choose your widgets.
8. Set your goals.
9. Start using Wellness Connected!

# Finding The Serial Number

Top



Bottom

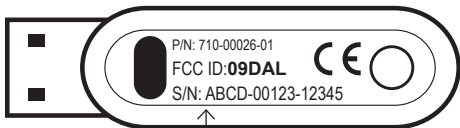

This is the number you need to enter  
at [www.wellnessconnected.com](http://www.wellnessconnected.com)

# Frequently Asked Questions

**Q: Why can't I store data files or photos on this memory stick?**

A: The ActiLink™ USB Transceiver is not a memory stick. It is a wireless transceiver (antennae) for receiving signals from Wellness Connected devices.

**Q: I purchased an XL-20 Wireless Activity Monitor and now I have two ActiLinks, what do I do with the second one?**

A: Use it in another computer to upload your data in multiple locations, such as your home or office.

**Q: I put the ActiLink into my computer's USB port, why aren't I getting data from my Wellness Connected devices?**

A: Have you fully installed the software? Have you purchased a service plan? Have you completed installation and set-up? Is the distance between your devices and the ActiLink too large or obstructed by metal? If none of these are the issue please contact us and we'll help.

# Warranty

This ActiLink™ USB Transceiver is covered by a 1 year warranty.

A&D Medical (the "Company") warrants to the first retail purchaser that this A&D Medical ActiLink USB Transceiver (the "Product") will be free from defects in material and workmanship for one year from the time of purchase. To obtain warranty service for such defects, return the Product, freight and insurance prepaid, together with satisfactory proof of date of purchase such as a sales receipt and shipping costs to:

**A&D Medical**  
**Attn: Warranty Department**  
**1756 Automation Parkway**  
**San Jose, CA 95131**

Include a check for return shipping and insurance. Contact A&D Medical at 1-888-726-9966 for appropriate shipping costs.

At A&D Medical's option, the Company will repair or replace any Product found to be defective and return it to you. (Any replacement product may be new or refurbished.) This warranty will not apply if the defect or malfunction results from: subjecting the Product to any but the specified voltage; modification, alteration or repairs of the Product by persons not authorized by A&D Medical; misuse, abuse, damage during transit or lack of reasonable care with respect to the Product; or failure to follow the written instructions enclosed with the Product.

THE WARRANTY AND REMEDY PROVIDED ABOVE ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS WARRANTIES. IN NO EVENT SHALL A&D MEDICAL BE LIABLE FOR ANY LOSS, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, RESULTING FROM THE USE OR INABILITY TO USE THE PRODUCT, WHETHER RESULTING FROM BREACH OF WARRANTY OR ANY OTHER LEGAL THEORY, EVEN IF A&D MEDICAL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH INCONVENIENCE, DAMAGE OR LOSS.

Some states do not allow the exclusion of incidental or consequential damage, so that the above exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that may vary from state to state.

A&D Medical assumes no responsibility with regard to the use of this product. Every effort has been made to ensure that the information in this manual is accurate. A&D Medical is not responsible for printing or clerical errors.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operations. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this device.

# Contact Information

---

For more information regarding use, care or servicing of your XL-10 ActiLink™ USB Transceiver, contact:



A&D Medical

A division of A&D Engineering, Inc.

1756 Automation Parkway

San Jose, CA 95131

Toll-Free: 1-888-726-9966

[www.andmedical.com](http://www.andmedical.com)

# XL-10 ActiLink™ Manuel d'utilisation



Français



# Avec quel appareil fonctionne-t-il?

Utilisez votre émetteur-récepteur USB ActiLink™ avec ces produits  : Wellness Connected™ :



**XL-20/ActiPed™**  
Moniteur d'activités  
sans fil



**UA-851THW/UA-851TMW/UA-851THX**  
Tensiomètre  
automatique sans fil



**UC-324THW/UC-324TMW/UC-324THX**  
Balance de précision  
sans fil

# Comment démarrer

---

Avant de brancher l'émetteur récepteur USB ActiLink™ USB sur votre ordinateur :


1. Allez à [www.wellnessconnected.com/getstarted](http://www.wellnessconnected.com/getstarted)
2. Choisissez le plan de service qui convient le mieux à vos besoins.
3. Achetez ce plan.
4. Téléchargez le logiciel Wellness Connected qui est approprié pour votre ordinateur.
5. Exécutez le logiciel et suivez le processus d'installation.
6. Entrez les champs requis (vos renseignements de santé et les numéros de série du produit).
7. Choisissez vos objets fenêtres.
8. Établissez vos objectifs.
9. Commencez à utiliser Wellness Connected!

# Trouver le numéro de série

Dessus



Dessous

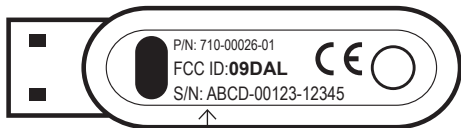

Il s'agit du numéro que vous devez  
entrer à [www.wellnessconnected.com](http://www.wellnessconnected.com)

# Foire aux questions

---

**Q : Pourquoi n'est-il pas possible d'enregistrer des fichiers ou des photos sur cette carte mémoire?**

R : L'émetteur récepteur USB ActiLink™ n'est pas une carte mémoire. Il s'agit d'un émetteur récepteur (antenne) sans fil qui reçoit des signaux des appareils Wellness Connected.

**Q : J'ai acheté un moniteur d'activités sans fil XL-20 et maintenant, j'ai deux ActiLinks. Que dois-je faire avec le second?**

R : Utilisez-le sur un autre ordinateur pour télécharger vos données à plusieurs endroits, comme à la maison ou au bureau.

**Q : J'ai mis ActiLink dans le port USB de mon ordinateur, mais je ne reçois pas de données de mes appareils Wellness Connected.**

R : Avez-vous complètement installé le logiciel? Avez-vous acheté un plan de service? Avez-vous terminé l'installation et la configuration? Est-ce que la distance entre vos appareils et ActiLink Si aucun de ces éléments ne corrige le problème, communiquez avec nous et nous serons heureux de vous aider.

# Garantie

L'émetteur récepteur ActiLink™ est couvert par une garantie d'un an.

A&D Medical (l'« Entreprise ») garantit au premier acheteur au détail que l'émetteur récepteur USB ActiLink (le « Produit ») sera libre de défauts de matériaux et de main d'œuvre pendant un an à compter de la date d'achat. Pour obtenir le service de garantie en cas de défectuosité, retournez le Produit, fret et assurance payés d'avance, avec une preuve satisfaisante de la date d'achat, comme le reçu de vente, et les frais d'expédition à :

**A&D Medical**  
**Attn : Warranty Department**  
**1756 Automation Parkway**  
**San Jose, CA 95131 É.-U.**

Inclure un chèque pour le fret et l'assurance de retour. Communiquez avec A&D Medical au 1-888-726-9966 pour obtenir la somme des frais d'expédition.

À la discrétion de A&D Medical, l'Entreprise réparera ou remplacera tout Produit s'avérant défectueux et vous le retournera. (Tous produit de remplacement peut être neuf ou remis en état) Cette garantie sera considérée nulle si la cause du défaut ou du mauvais fonctionnement est l'une des suivantes : le Produit a été soumis à une tension autre que celle qui est précisée; des modifications, des altérations ou des réparations ont été apportées au Produit par des personnes non autorisées par A&D Medical; une mauvaise utilisation, de l'abus, des dommages pendant l'expédition ou un manque de soin raisonnable relativement au Produit; ou le non-respect des directives écrites qui accompagnent le Produit.

LA GARANTIE ET LE REMÈDE FOURNIS CI-DESSUS SONT EXCLUSIFS ET REMPLACENT TOUTES LES AUTRES GARANTIES EXPRESSES. A&D MEDICAL NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUTE PERTE, DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS OU INDIRECTS, DÉCOULANT DE L'UTILISATION OU DE L'INCAPACITÉ À UTILISER LE PRODUIT, EN RAISON D'UNE VIOLATION À LA GARANTIE OU TOUTE AUTRE THÉORIE LÉGALE, MÊME SI A&D MEDICAL A ÉTÉ AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ D'UN TEL INCONVÉNIENT, DE TELS DOMMAGES OU D'UNE TELLE PERTE.

Certaines provinces ne permettent pas l'exclusion des dommages consécutifs ou indirects, par conséquent les exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie vous confère des droits légaux précis et vous pouvez aussi avoir d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

A&D Medical n'assume aucune responsabilité quant à l'utilisation de ce Produit. Tout effort a été déployé pour s'assurer que les renseignements se trouvant dans ce manuel sont exacts. A&D Medical n'assume aucune responsabilité pour les erreurs d'impression ou de rédaction.

Cet appareil est conforme au paragraphe 15 des règlements de la FCC. Le fonctionnement dépend des deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer de l'interférence nocive; (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris l'interférence pouvant causer un fonctionnement indésirable. Les changements ou les modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner cet appareil.

# Coordonnées

---

Pour des renseignements supplémentaires concernant l'utilisation, l'entretien ou la réparation de votre émetteur récepteur USB ActiLink™ XL-10, veuillez communiquer avec :



A&D Medical

Une division de A&D Engineering, Inc.

1756 Automation Parkway

San Jose, CA 95131

É.-U. Sans frais : 1-888-726-9966

[www.andmedical.com](http://www.andmedical.com)

# Important!

Si vous avez besoin d'aide pour l'installation ou le fonctionnement. Nous pouvons vous aider! Veuillez nous appeler EN PREMIER avant de communiquer avec votre détaillant à la Ligne de service à la clientèle A&D Medical 1-888-726-9966 (sans Frais). Un représentant spécialement formé vous aidera.



**A&D Medical**

**Une division de A&D Engineering, Inc.  
1756 Automation Parkway  
San Jose, CA 95131  
[www.andmedical.com](http://www.andmedical.com)**

© 2010 A&D Medical. Tous droits réservés.

LifeSource, le logo de LifeSource, Wellness Connected et le logo de Wellness Connected sont des marques de commerce de A&D Medical enregistrées aux É.-U.

La balance de précision UC-324THW et l'émetteur-récepteur USB ActiLink sont couverts par un ou plusieurs des numéros de brevet américains suivants : 6336365, 6018705, 6052654, 6493652, 6298314, 6560903, 6611789, 6536139, 6876947, 6882955, 7187924, ainsi que par des brevets en instance.

LES SPÉCIFICATIONS PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.

Imprimé en Chine. 11/2010

I-MAN-XL10 Rev. A

# XL-10 ActiLink™ Manual del usuario



Español



# ¿Con qué funciona?

Utilice el transmisor/receptor USB de ActiLink™ con estos productos



Wellness  
Connected™



## **XL-20/ActiPed™**

Monitor inalámbrico de actividad



## **UA-851THW/UA-851TMW/UA-851THX**

Monitor automático inalámbrico de presión arterial



## **UC-324THW/UC-324TMW/UC-324THX**

Balanza inalámbrica de precisión

# Cómo empezar

---

Antes de conectar el transmisor/receptor USB de ActiLink™ en la computadora:


1. Visite [www.wellnessconnected.com/getstarted](http://www.wellnessconnected.com/getstarted)
2. Elija el plan de servicio que mejor satisfaga sus necesidades.
3. Compre el plan.
4. Descargue el software Wellness Connected que sea compatible con su computadora.
5. Ejecute el software y siga el proceso de instalación.
6. Complete los campos necesarios (con su información de salud y el número de serie del producto).
7. Elija el widget.
8. Establezca su objetivo.
9. ¡Comience a usar Wellness Connected!

# Ubicación del número de serie

Parte superior



Parte inferior

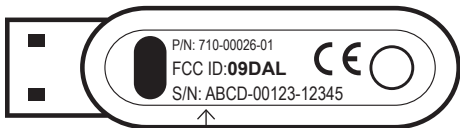

Este es el número que debe ingresar en [www.wellnessconnected.com](http://www.wellnessconnected.com)

# Preguntas frecuentes

**P: ¿Por qué no puedo almacenar archivos de datos o imágenes en esta tarjeta de memoria (memory stick)?**

R: El transmisor/receptor USB de ActiLink™ no es una tarjeta de memoria. Es un transmisor/receptor inalámbrico (antena) que recibe señales de los dispositivos Wellness Connected.

**P: Adquirí un monitor inalámbrico de actividad XL-20 y ahora tengo dos ActiLink. ¿Qué hago con el segundo?**

R: Utilícelo en otra computadora para cargar datos en distintas ubicaciones, como en el hogar o en la oficina.

**P: Coloqué el ActiLink en el puerto USB de la computadora. ¿Por qué no obtengo datos de los dispositivos Wellness Connected?**

R: ¿Instaló el software en su totalidad? ¿Compró un plan de servicios? ¿Completó la instalación y la configuración? ¿La distancia entre los dispositivos ActiLink es demasiado grande o está interferida por metales? Si ninguno de estos es el problema, comuníquese con nosotros y lo ayudaremos.

# Garantía

El transmisor/receptor USB de ActiLink™ está garantizado por 1 año.

A&D Medical (la "Empresa") garantiza al primer comprador, durante un año a partir de la fecha de la compra, que este transmisor/receptor USB de ActiLink™ de A&D Medical (el "Producto") no tiene defectos en los materiales utilizados para su fabricación ni en el proceso de manufactura. Para obtener los servicios de garantía por estos defectos debe enviar el producto, con servicio de envío prepagado y asegurado, junto con el comprobante fehaciente de la fecha de compra, como el recibo de pago del vendedor, y los costos de envío a la siguiente dirección:

**A&D Medical**  
**Attn: Warranty Department**  
**1756 Automation Parkway**  
**San Jose, CA 95131**

A&D Medical Attn: Warranty Department 1756 Automation Parkway San Jose, CA 95131

Incluya un cheque que cubra el envío del producto y el seguro. Comuníquese con A&D Medical al 1-888-726-9966 para obtener los costos de envío adecuados.

A&D Medical puede elegir entre reparar o reemplazar los Productos defectuosos, y enviárselos a usted. (Los productos reemplazados serán nuevos o reparados). Esta garantía no tiene validez si el defecto, o funcionamiento defectuoso, resulta de: sometimiento del Producto a un voltaje distinto al especificado; modificación, alteración o reparación del Producto por parte de personas no autorizadas por A&D Medical; utilización incorrecta, abuso o daño durante el transporte o falta de cuidado razonable con respecto al Producto o falta de cumplimiento de las instrucciones escritas adjuntas al Producto.

LA GARANTÍA Y LAS REPARACIONES QUE SE DESCRIBEN ANTERIORMENTE EXCLUYEN Y REEMPLAZAN TODA OTRA GARANTÍA EXPRESA. EN NINGÚN CASO A&D MEDICAL SERÁ RESPONSABLE POR PÉRDIDAS O DAÑOS EVENTUALES O CONSECUENTES QUE SEAN EL RESULTADO DEL USO O DE LA IMPOSIBILIDAD DE USAR EL PRODUCTO, YA SEA QUE RESULTEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS GARANTÍAS O DE TODO OTRO FUNDAMENTO LEGAL, INCLUSO SI SE INFORMÓ A A&D MEDICAL SOBRE LA POSIBILIDAD DE ESTOS INCONVENIENTES, DAÑOS O PÉRDIDAS.

Algunos estados no permiten la exclusión de daños eventuales o consecuentes; por lo tanto, es posible que la exclusión descrita anteriormente no sea aplicable. Esta garantía le otorga derechos legales particulares y es posible que pueda ejercer otros derechos que pueden variar de estado en estado.

A&D Medical no asume responsabilidad alguna en relación con el uso de este producto. Se han hecho todos los esfuerzos necesarios para asegurar que la información de este manual sea correcta. A&D Medical no se hace responsable de errores administrativos o de impresión.

Este dispositivo cumple con las disposiciones de la Parte 15 de las Normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). El funcionamiento del dispositivo está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencias nocivas y (2) este dispositivo debe aceptar todas las interferencias recibidas, incluidas aquellas que podrían causar un funcionamiento indeseado. Los cambios o las modificaciones que no sean expresamente aprobados por el responsable de cumplir con las disposiciones antes mencionadas podrían anular la facultad del usuario de operar el dispositivo.

# Información de contacto

---

Para obtener más información sobre la utilización, el mantenimiento o la reparación del transmisor/receptor USB XL-10 de ActiLink™, comuníquese con:



Una división de A&D Engineering, Inc.  
1756 Automation Parkway  
San Jose, CA 95131  
Número gratuito: 1-888-726-9966  
[www.andmedical.com](http://www.andmedical.com)

# ¡Importante!

Si necesita ayuda con la instalación u operación, ¡Podemos ayudarlo! Llámenos ANTES de contactar a su vendedor a Línea de Salud de A&D Medical 1-888-726-9966 (gratis en EE. UU.). Un representante especialmente capacitado lo ayudará.



**A&D Medical**

**Una división de A&D Engineering, Inc.**

**1756 Automation Parkway**

**San Jose, CA 95131**

**[www.andmedical.com](http://www.andmedical.com)**

© 2010 A&D Medical. Reservados todos los derechos.

LifeSource, el logotipo de LifeSource, Wellness Connected y el logotipo de Wellness Connected son marcas comerciales de A&D Medical registradas en EE. UU.

La Balanza de Precisión UC-324THW y el Transceptor USB ActiLink están cubiertos por una o más de las patentes estadounidenses n.º 6336365, 6018705, 6052654, 6493652, 6298314, 6560903, 6611789, 6536139, 6876947, 6882955, 7187924 y patentes pendientes.

**LAS ESPECIFICACIONES ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.**

Impreso en China 11/2010

I-MAN-XL10 Rev. A

# Important!

---

If you need assistance with the set-up or operation, we can help! Please call us **FIRST** before contacting your retailer at A&D Medical Customer Service Line 1-888-726-9966 (Toll Free). A specially trained representative will assist you.

# **A&D**

**A&D Medical**

**A division of A&D Engineering, Inc.**

**1756 Automation Parkway**

**San Jose, CA 95131**

**[www.andmedical.com](http://www.andmedical.com)**

© 2010 A&D Medical. All rights reserved.

LifeSource, the LifeSource logo, Wellness Connected, and the Wellness Connected logo are trademarks of A&D Medical registered in the U.S.

THE XL-10 ACTILINK USB TRANSCEIVER is covered by one or more of U.S. patent numbers 6336365, 6018705, 6052654, 6493652, 6298314, 6560903, 6611789, 6536139, 6876947, 6882955, 7187924 and patents pending.

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

Printed in China 11/2010

I-MAN-XL10 Rev. A